


STYLO VIRAFERONPEG LYOPHILISE A RECONSTITUER




Relativement fragile, il faut mélanger la poudre et le solvant
(lorsqu'il est reconstitué, il faut le conserver entre 2° et 8°)

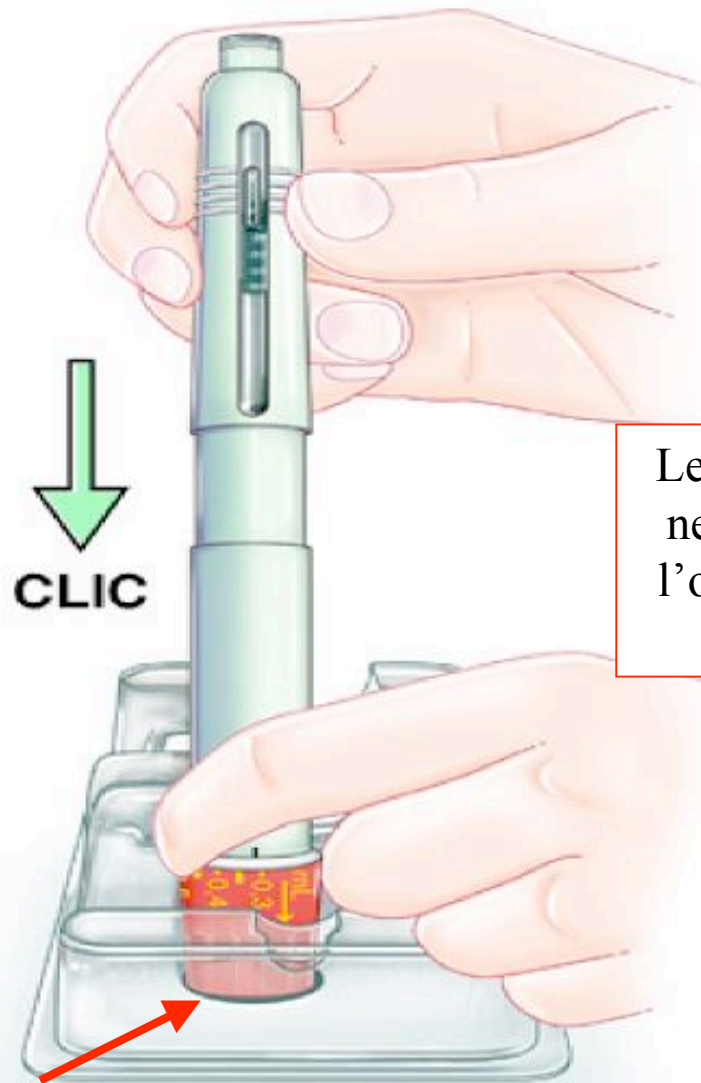

Le stylo doit être vertical et ne doit pas bouger lorsque l'on fait descendre la partie haute vers le bas.

SURTOUT INSERER LE STYLO
DANS L'ENCOCHE PREVU
A CET EFFET

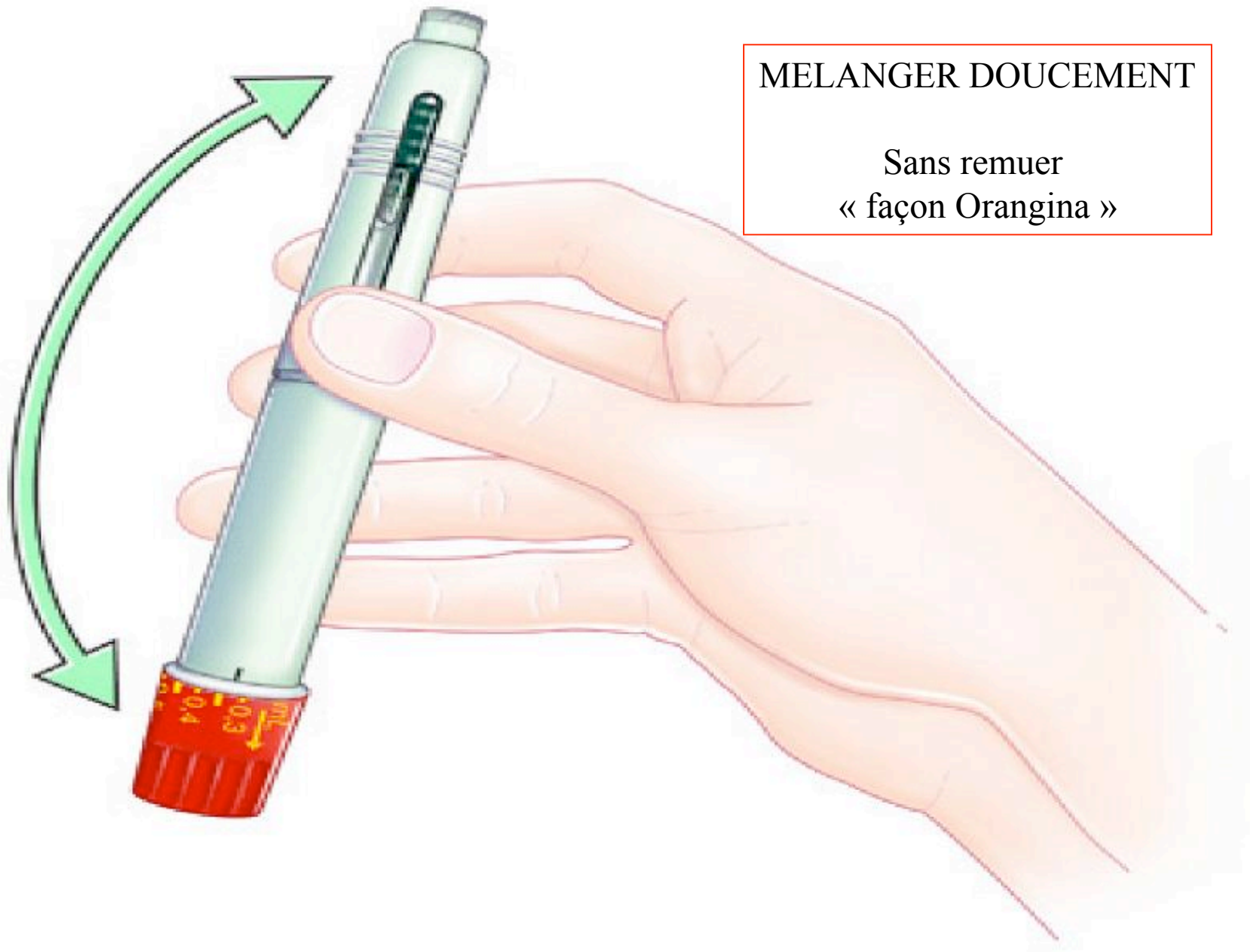



MELANGER DOUCEMENT

Sans remuer
« façon Orangina »

Nettoyer la valve
avec le tampon alcoolisé

(Il y a 2 tampons)

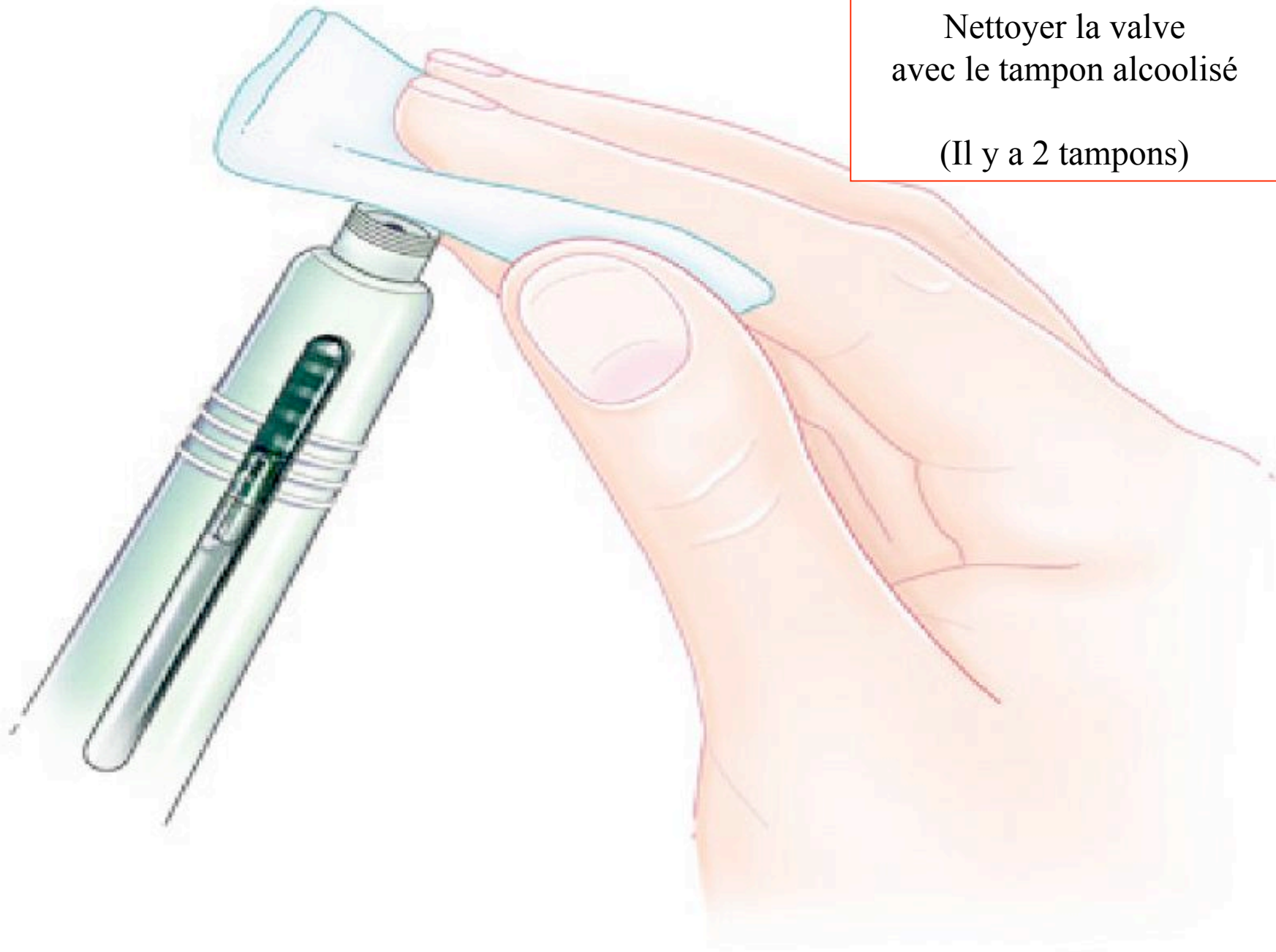

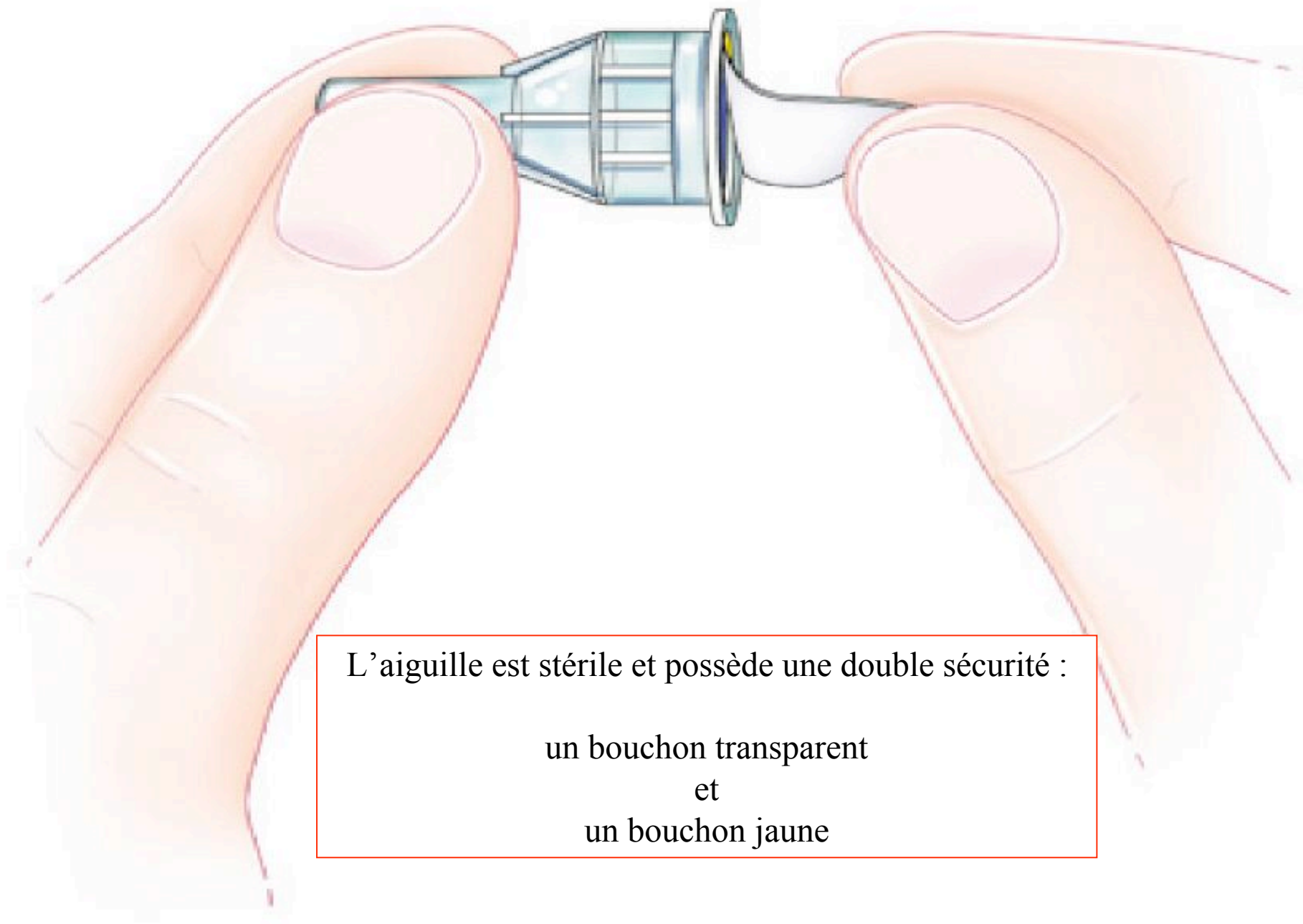


L'aiguille est stérile et possède une double sécurité :

un bouchon transparent

et

un bouchon jaune

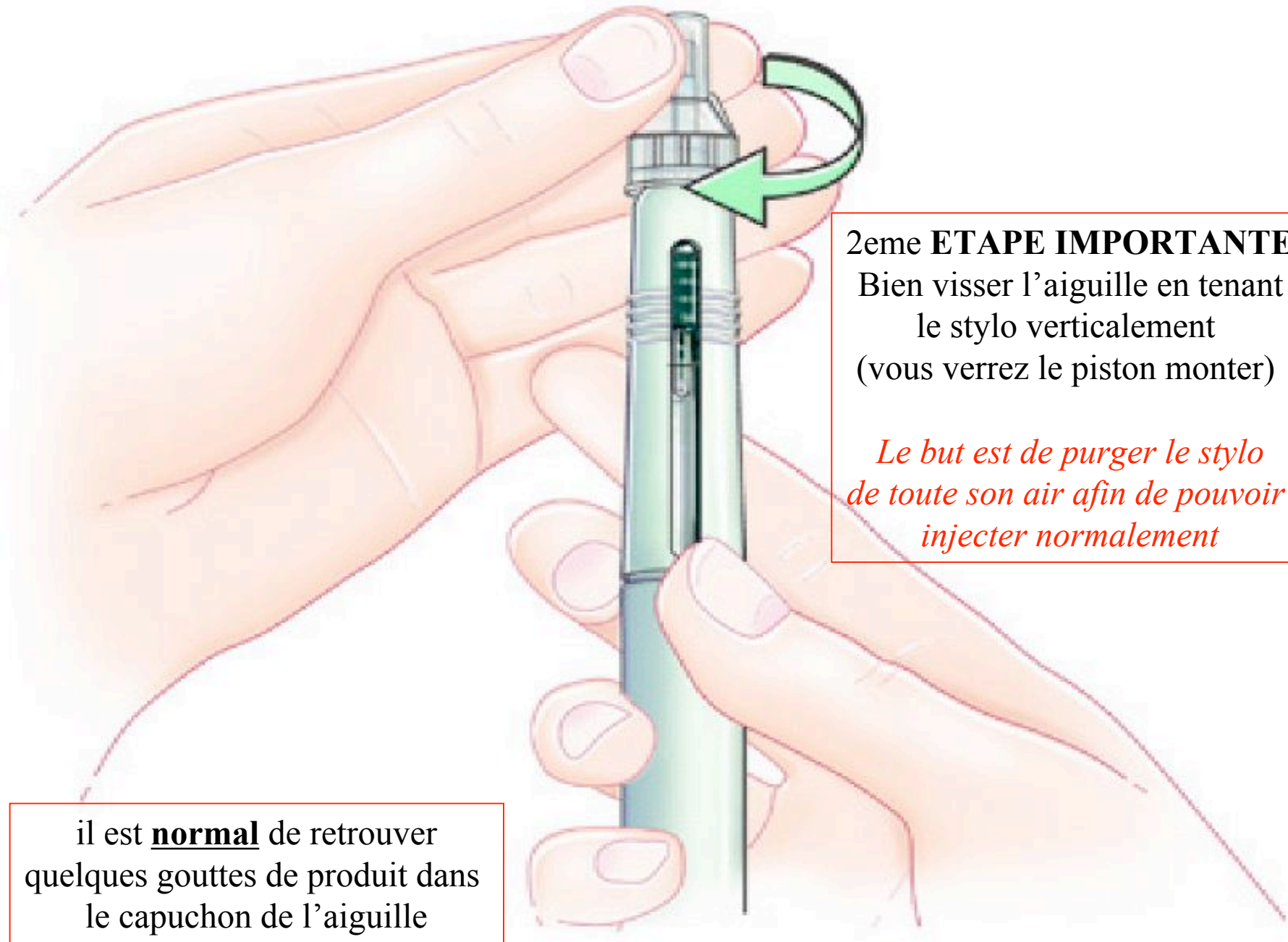


2eme ETAPE IMPORTANTE
Bien visser l'aiguille en tenant
le stylo verticalement
(vous verrez le piston monter)

*Le but est de purger le stylo
de toute son air afin de pouvoir
injecter normalement*


il est **normal** de retrouver
quelques gouttes de produit dans
le capuchon de l'aiguille

La **3eme ETAPE**
est tout aussi importante

Pour afficher le volume a injecter
qu'il vous a été prescrit il faut
tirer l'embout coloré du stylo
suffisamment fort

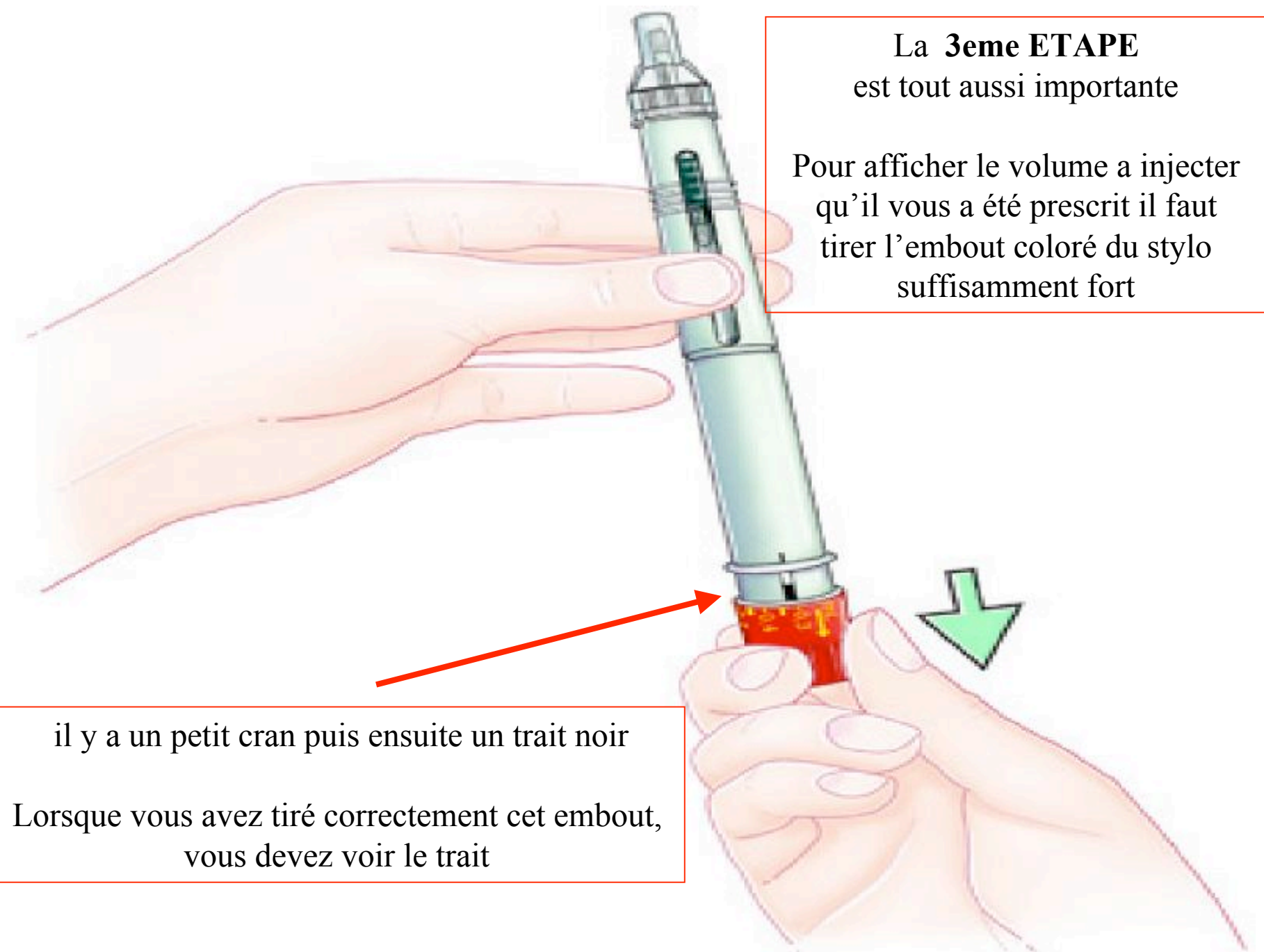

il y a un petit cran puis ensuite un trait noir
Lorsque vous avez tiré correctement cet embout,
vous devez voir le trait

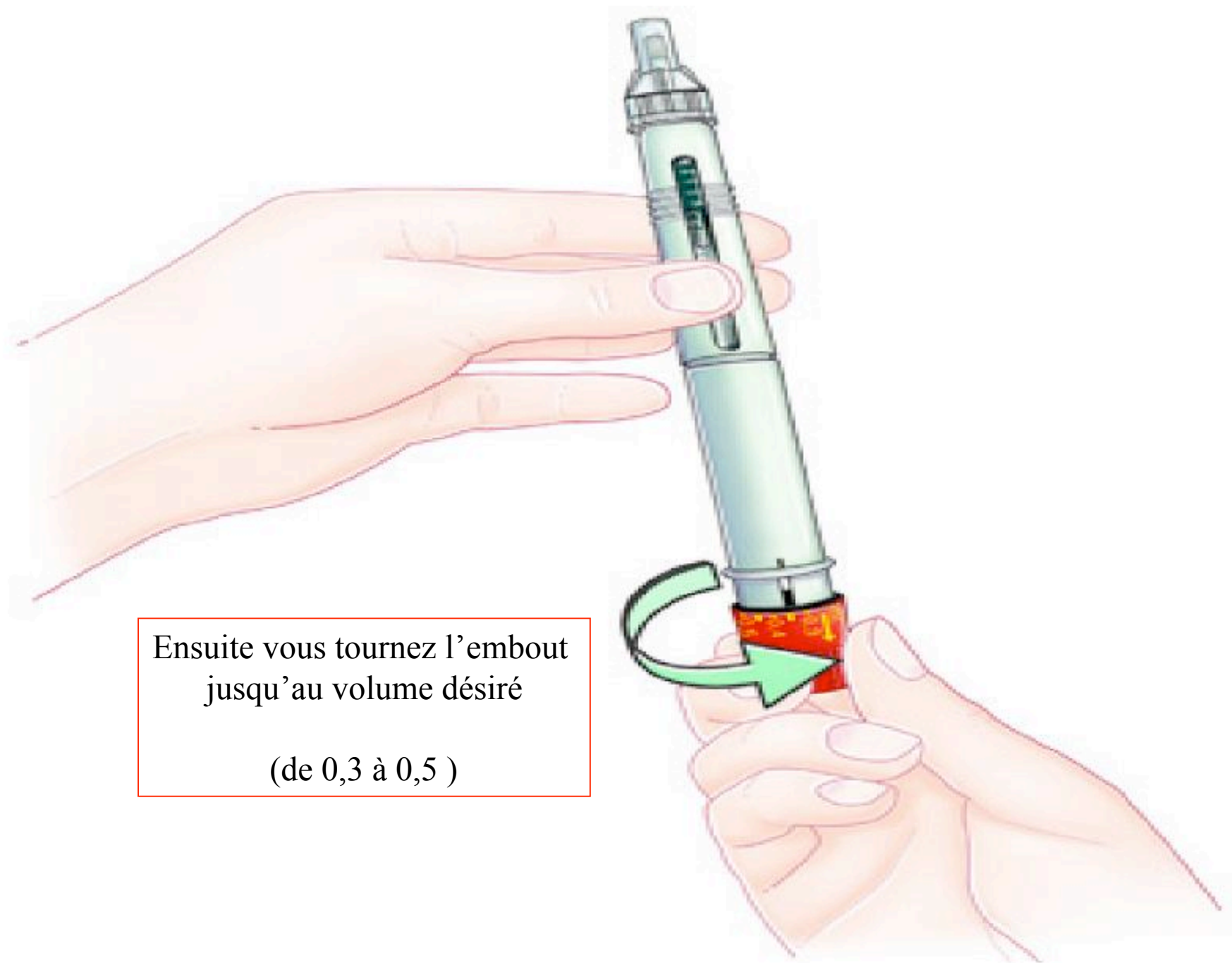


Ensuite vous tournez l'embout
jusqu'au volume désiré
(de 0,3 à 0,5)





Avec le tampon alcoolisé vous nettoyez
l'endroit choisi pour l'injection

(Souvent le ventre et les cuisses
c'est moins douloureux)

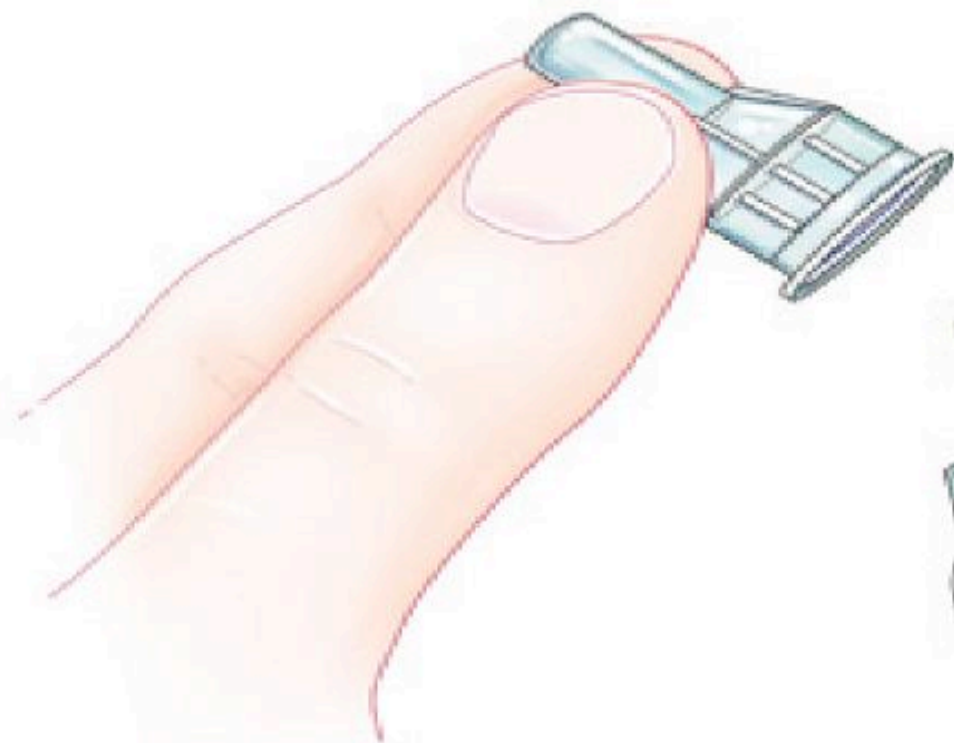

Vous décapuchonnez le stylo
du premier bouchon transparent

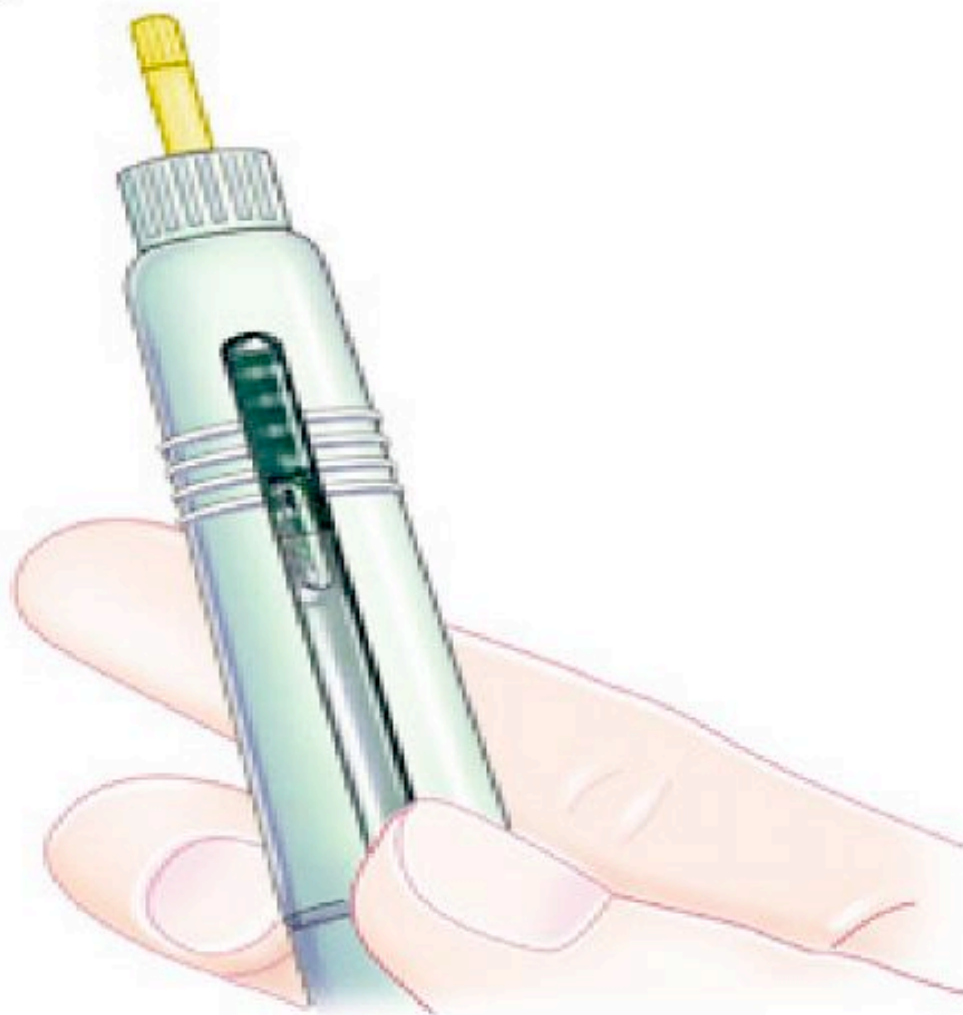


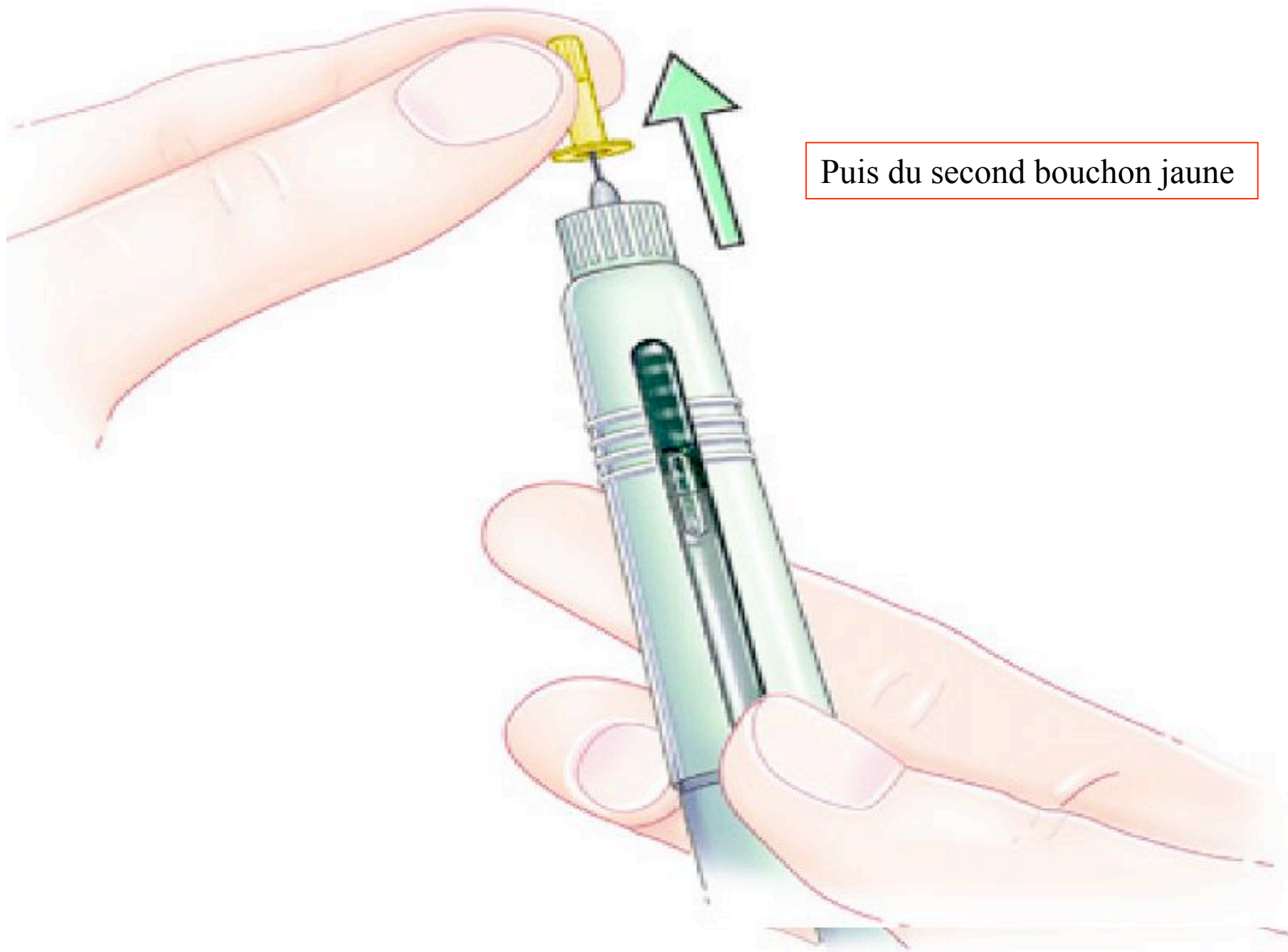

Puis du second bouchon jaune

Ensuite vous piquez
le plus verticalement possible

Il n'est pas nécessaire de pincer la peau
(sauf si c'est plus facile pour vous
piquez)

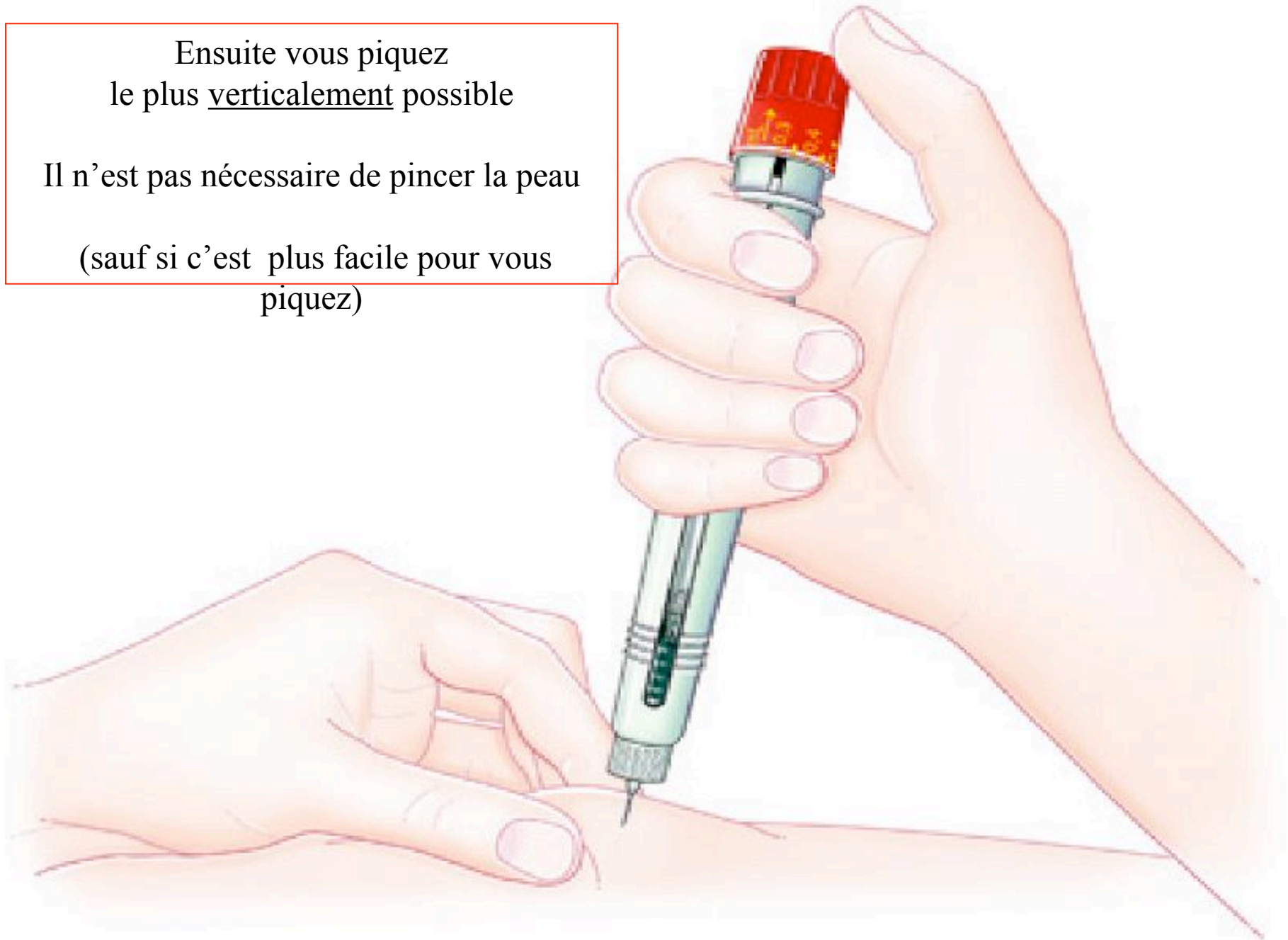


Il faut compter au moins jusqu'à 5
pour injecter la totalité du produit

En effet l'aiguille est très fine
et il y a une forte pression

(pour certain il faudra appuyer assez fort)

C'est pour cela
que vous devez prendre le stylo
comme sur l'image
et non comme une seringue normale

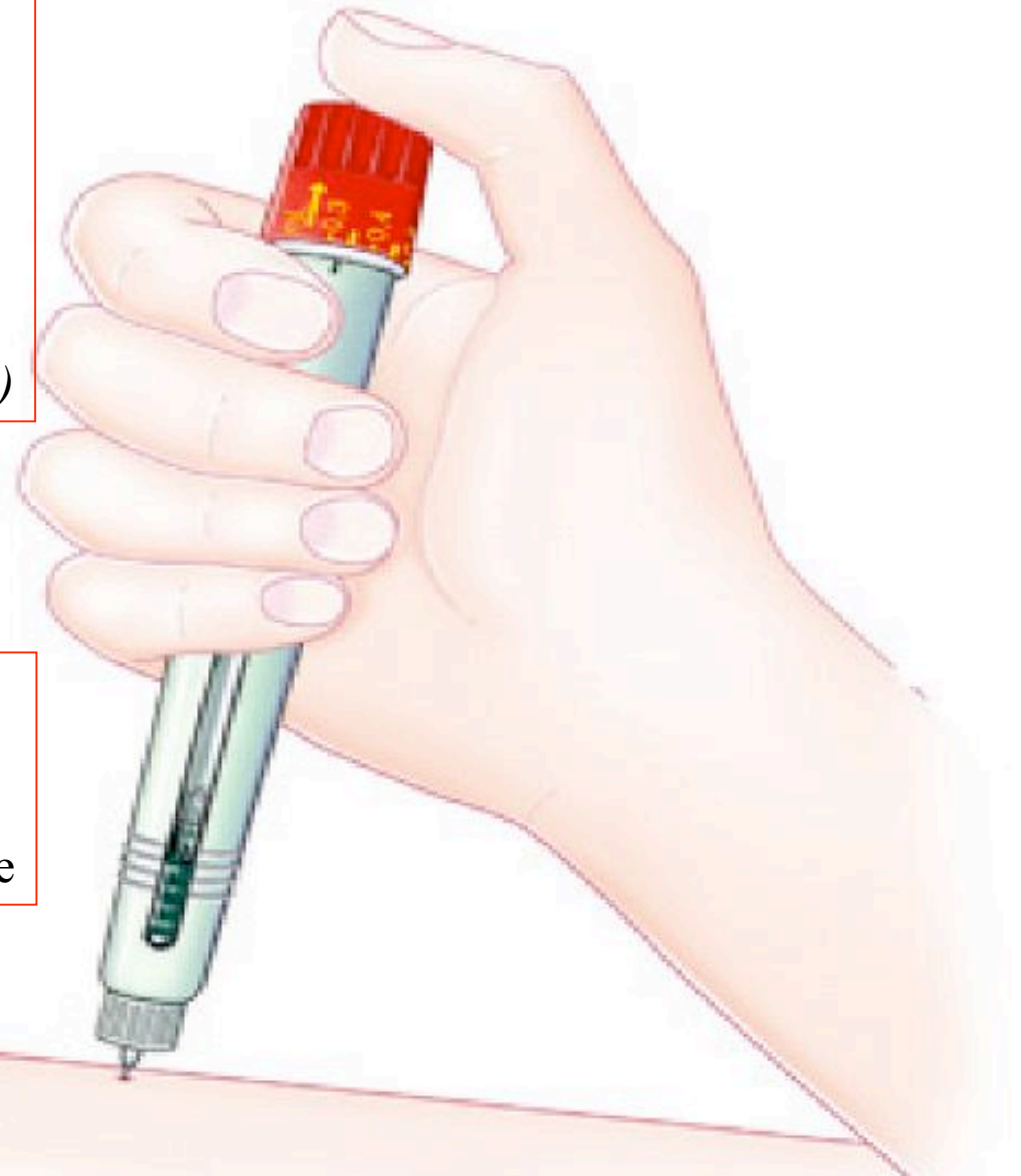


Bien tenu dans la main, vous pouvez pousser l'embout avec le pouce sans appuyer sur la peau
L'embout doit être en buter ce qui signifie que la totalité du produit a été injectée

Ensuite vous jetez le stylo dans le
récupérateur, qui vous a été donné

Par votre médecin prescripteur

(il peut contenir jusqu'à 12 stylos)

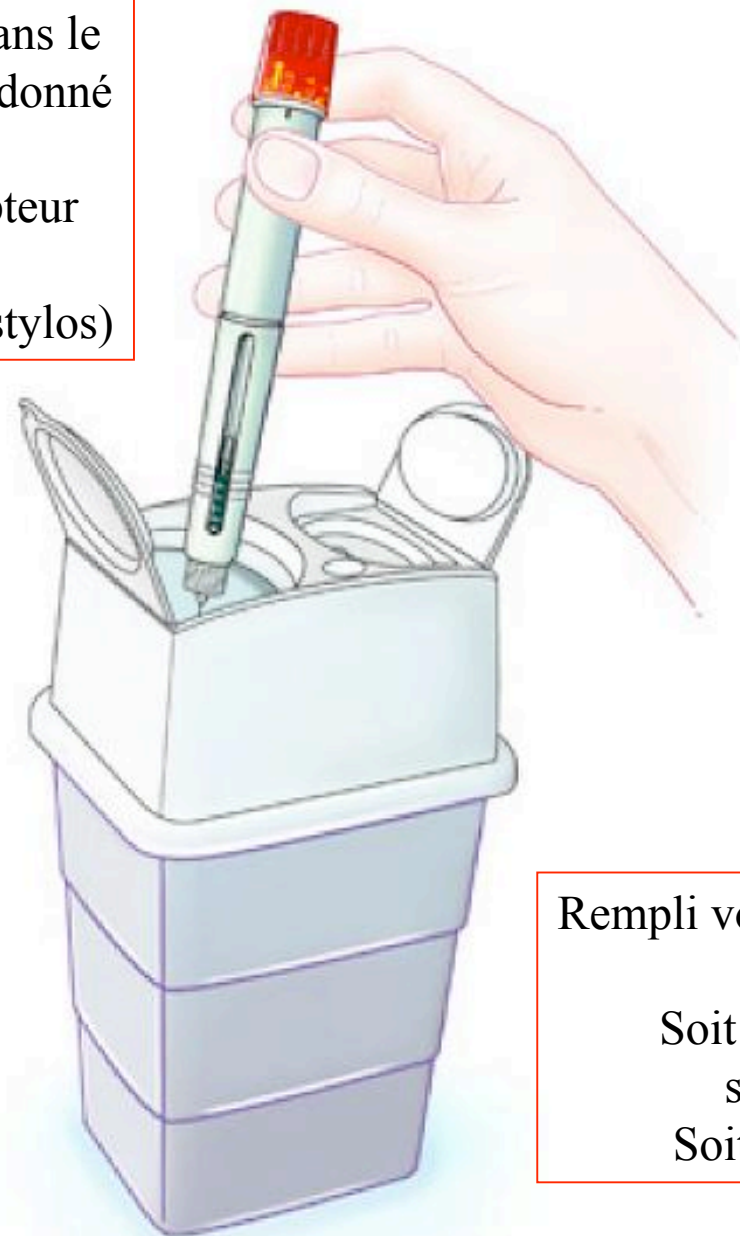

Rempli vous pouvez le redonner

Soit à votre médecin,
soit à l'hôpital,
Soit à la pharmacie .